

ALLEVYN GENTLE BORDER

Silicone gel adhesive hydrocellular foam dressing

Description

ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings have a triple-layered construction which combines an absorbent hydrocellular pad sandwiched between a perforated silicone gel adhesive wound contact layer and a highly permeable waterproof top film.

Mode of action

ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings facilitates high fluid management and promotes a moist wound healing environment which is optimal for healing. It also helps to minimise the risk of maceration. The perforated silicone gel adhesive wound contact layer allows exudate to pass through to the foam layer. The silicone adhesive layer is gentle, suitable for use on fragile skin and makes it easy to apply, reposition and remove the dressing. The hydrocellular foam layer absorbs exudate away from the wound. The breathable top film allows evaporation and aids the prevention of fluid and bacterial contamination of the wound and is showerproof.

Indications

1. Wound management on shallow, granulating wounds, chronic and acute exudative wounds, full and partial thickness wounds including:

- Pressure Ulcers
- Leg Ulcers
- Diabetic Foot Ulcers
- Surgical wounds
- First and second degree burns
- Donor Sites
- Skin tears
- Fungating Ulcers

2. Pressure ulcer prevention on intact skin, including pressure ulcers caused by medical devices, as part of a pressure ulcer prevention protocol.

Precaution: Care should be taken when using the dressing under medical devices near the nose and mouth, where moisture can build up and affect adherence, leading to dressing movement.

For more information please visit: www.allevyn.com

Precautions

- Care should be taken when using the dressing under medical devices near the nose and mouth, where moisture can build up and affect adherence, leading to dressing movement.
- The use of ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings, as part of a program of prophylaxis against the development of a pressure ulcer, does not preclude the need to continue to develop and follow a comprehensive pressure ulcer prevention protocol (e.g. regular repositioning, appropriate support surfaces, skin care and frequent skin assessments).
- Due to the gentle adhesive used, do not use this dressing to secure other medical devices to the patient.
- If reddening or sensitisation occurs discontinue use and consult a healthcare professional.
- Cutting the dressing will compromise the bacterial barrier and showerproof properties of the dressing.
- Do not immerse the dressing in water.
- Do not use with oxidizing agents such as hypochlorite solutions (e.g. EUSOL) or hydrogen peroxide as these can reduce the absorbency of the dressing.
- Single use only, and should not be re-used as cross contamination or infection may occur and the dressing may be ineffective.

- Once opened, do not retain unused dressings for application at a later date.
- If used on infected wounds, the infection should be managed as per local clinical protocol

ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings are for healthcare professional use or for use by patients under the direction of a healthcare professional.

When required, healthcare professionals should provide appropriate advice to patients on how to apply, monitor the dressing, remove, and dispose of the dressing and when to contact a healthcare professional as detailed in this leaflet.

Instructions for use

1. Cleanse the application site. Ensure surrounding skin is clean, dry and free from excess hair.
2. Select appropriate dressing size. Ensure the absorbent pad covers the entire wound or area to be protected. The scale on the pouch is for guidance only. Avoid contact of the pouch with the wound.
3. Remove first liner and anchor the adhesive side of the dressing to the skin. If applying the sacrum dressing, place the narrow end a minimum of 2cm/ $\frac{3}{4}$ in. above the anal sphincter, then smooth the dressing over the sacrum.
4. Remove remaining liner/liners. Smooth over. If used on a wound, ensure absorbent pad covers the wound.
5. Smooth down the borders. Ensure there are no creases that could compromise the seal. The dressing can be repositioned as required.
6. ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings can be cut especially to dress wounds on the heel, elbow and other awkward areas. Always use clean technique when cutting the dressing. Cutting the dressing will compromise the bacterial barrier and showerproof properties of the dressing. Ensure any exposed foam areas are covered with an appropriate film dressing taking care not to cover the entire dressing.

For further guidance on application of Heel and Sacrum see diagrams on dressing pouch or carton.

For necrotic or sloughy wounds, ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings can be used in conjunction with INTRASITE GEL Hydrogel wound dressings.

Observation when used for pressure ulcer prevention: frequently inspect the skin for pressure damage by lifting back one corner, inspecting and then repositioning the dressing.

Removal: Lift one corner and slowly peel back until completely removed.

Dispose of ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings according to local clinical protocols, or throw away hygienically after use.

Frequency of change

During the early stages of treatment inspect the ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings frequently. ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings can be left in place for up to 7 days, except the sacral area where dressings can be left in place for up to 5 days. ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings should be changed depending on the condition of the wound and surrounding skin, or until exudate is visible as strike through and approaches to within 0.5cm/3/16in. of the edge of the dressing pad, whichever is sooner. The decision of when to change should be dependent upon clinical assessment and local protocols under the guidance of a healthcare professional. Complaints@Smith-Nephew.com

If during the use of this device you believe that a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and your competent authority. Complaints@Smith-Nephew.com

Product availability

Code	Size	Availability
66800269	7.5cm x 7.5cm / 3in. x 3in.	Carton of 10
66800270	10cm x 10cm / 4in. x 4in.	Carton of 10
66800900	10cm x 20cm / 4in. x 8in.	Carton of 10
66800264	10cm x 25cm / 4in. x 9.8in.	Carton of 10
66800265	10cm x 30cm / 4in. x 11.8in.	Carton of 10
66800272	12.5cm x 12.5cm / 5in. x 5in.	Carton of 10
66802142	12.5cm x 12.5cm / 5in. x 5in.	Carton of 3
66800975	15cm x 15cm / 6in. x 6in.	Carton of 10
66800273	17.5cm x 17.5cm / 7in. x 7in.	Carton of 10
66800897	Sacrum Dressing 16.8cm x 17.1cm / 65/8in. x 63/4in.	Carton of 6
66800898	Sacrum Dressing 16.8cm x 17.1cm / 65/8in. x 63/4in.	Carton of 10
66801031	Sacrum Dressing 21.6cm x 23cm / 81/2in. x 9in.	Carton of 10
66800506	Heel 23cm x 23.2cm / 9in. x 91/8in.	Carton of 5

Trade Marks of Smith+Nephew. Date of issue 04/2024. Revision 02.

ALLEVYN GENTLE BORDER

Silikoongeelist adhesiivne hüdrotsellulaarne vahtplaaster

Kirjeldus

ALLEVYN GENTLE BORDER plaastrid on kolmekihilised, ühendades imava hüdrotsellulaar padjakese, mis on paigutatud perforeeritud silikoongeelist haavavõrgu ja väga läbilaskva veekindla pealmise kile vahele.

Toimemehhanism

ALLEVYN GENTLE BORDER plaastrite kasutamine hõlbustab tõhusat vedeliku jaotust ja soodustab haava paranemiseks optimaalset niisket keskkonda. Samuti aitab see minimeerida matsratsiooni ohtu. Perforeeritud silikoongeele kleepuv haavavõrk võimaldab eksudaadil tungida läbi vahukihi. Kleepuv silikoonkiht on õrn, sobib kasutamiseks õrnal nahal ja võimaldab plaastrit hõlpsasti peale panna, ümber paigutada ja eemaldada. Hüdrotsellulaarne vahukiht imab eksudaadi haavast eemale. Dušikindel hingav pealne kile võimaldab aurustumist ja aitab vältida haava vedelikuga ja bakteriaalset saastumist.

Näidustused

1. Madalate, granuleerivate haavade, krooniliste ja ägedate eksudeerivate haavade, täis- ja osalise paksusega haavade ravi, sealhulgas:

- survehaavandid
- jalahaavandid
- diabeetilised jalahaavandid
- kirurgilised haavad
- esimese ja teise astme põletushaavad
- doonor kohad
- naharebendid
- seeninfektsiooniga haavandid

2. Survehaavandite ennetamine tervel nahal, sealhulgas meditsiiniseadmete põhjustatud survehaavandid, osana survehaavandi ennetamise

Ettevaatusabinõu: ravijuhendist. ettevaatlik tuleb olla, kui plaastrit kasutatakse meditsiiniseadmete all nina ja suu lähedal, kuhu võib koguneda niiskus ja mõjutada plaastri kinnitumist, mis võib põhjustada selle

liikumist. Lisateabe saamiseks külastage: www.allevyn.com

Ettevaatusabinõud

- Ettevaatlik tuleb olla, kui plaastrit kasutatakse meditsiiniseadmete all nina ja suu lähedal, kuhu võib koguneda niiskus ja mõjutada plaastri kinnitumist, mis võib põhjustada selle liikumist.
- ALLEVYN GENTLE BORDER plaastrite kasutamine profülaktika programmi raames, et vältida survehaava teket, ei välista vajadust jätkata ulatusliku survehaava ennetamise ravijuhendi koostamist ja järgimist (nt regulaarne ümberpaigutamine, asjakohased tugipinnad, nahahooldus ja sagedased naha hindamised).
- Õrna liimi tõttu ärge kasutage seda plaastrit patsiendi külge teiste meditsiiniseadmete kinnitamiseks.
- Kui tekib punetus või ülitundlikkus, lõpetage kasutamine ja konsulteerige tervishoiutöötajaga.
- Plaastri lõikamine kahjustab selle bakteriaalset barjääri ja dušikindlaid omadusi.
- Ärge kastke plaastrit vette.
- Ärge kasutage oksüdeerivate ainetega, näiteks hüpokloriidi lahustega (nt EUSOL) või vesinikperoksiidiga, kuna need võivad vähendada plaastri absorbeerivust.
- Ainult ühekordseks kasutamiseks ning neid ei tohi uuesti kasutada, kuna võib tekkida ristsaastumine või infektsioon ja plaaster võib muutuda ebaefektiivseks.
- Pärast avamist ärge hoidke kasutamata jäänud plaastrit alles, et neid hiljem peale panna.

- Infektsiooniga haavadel kasutamisel tuleb infektsiooni ravida vastavalt kohalikele ravijuhendile.

ALLEVYN GENTLE BORDER plaastrid on mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötajatele või patsientidele tervishoiutöötaja juhendamisel

Vajaduse korral peaksid tervishoiutöötajad andma patsientidele asjakohast nõu, kuidas plaastrit peale panna, jälgida, eemaldada ja kõrvaldada ning millal võtta ühendust tervishoiutöötajaga, nagu on kirjeldatud käesolevas infolehes.

Kasutusjuhised

1. Puhastage paigalduskoht. Veenduge, et ümbritsev nahk oleks puhas, kuiv ja ilma liigsete karvadeta.
2. Valige sobiv haavaplaastri suurus. Veenduge, et imav padjake kataks kogu kaitstava haava või piirkonna. Pakendil olev kaal on ainult suunav. Vältige välise pakendi kokkupuudet haavaga.
3. Eemaldage esimene kiht ja kinnitage plaastri kleepuv pool naha külge. Ristluuplaastri paigaldamisel asetage kitsas ots vähemalt 2 cm kõrgusele pärakusulgurist, seejärel siluge plaaster ristлуу kohale.
4. Eemaldage ülejäänud kiht/kihid. Siluge. Kui kasutate haaval, veenduge, et imav padjake kataks haava.
5. Siluge servadelt üle. Veenduge, et ei oleks kortse, mis võiksid tihendit kahjustada. Plaastrit saab vastavalt vajadusele ümber paigutada.
6. ALLEVYN GENTLE BORDER plaastreid saab lõigata spetsiaalselt kanna, küünarnuki ja muude raskesti seotavate piirkondade haavade katmiseks. Kasutage plaastri lõikamisel alati puhast tehnikat. Plaastri lõikamine kahjustab selle bakteriaalset barjääri ja dušikindlaid omadusi. Veenduge, et kõik avatud vahtkatttega alad on kaetud sobiva kilekatttega, jälgides, et see ei kataks kogu plaastrit.

Lisajuhiseid kann- ja ristluuplaastrite pealekandmise kohta vt skeemidelt toote pakendil või karbil

Nekrootiliste või lahtiste haavade puhul võib plaastreid ALLEVYN GENTLE BORDER kasutada koos

INTRASITE GEL hüdrogeeliga. Vaatlus, kui seda kasutatakse survehaavandi vältimiseks: kontrollige sageli naha surve vigastusi, tõstes ühe nurga üles, kontrollides ja seejärel asetades

plaastri tagasi oma kohale. Eemaldamine: tõmmake üks nurk lahti ja koorige

aeglaselt tagasi, kuni see täielikult on eemaldatud. Kõrvaldage ALLEVYN GENTLE BORDER plaaster vastavalt kohalikele kliinilistele ravijuhenditele või

Vahetamise tihedus

Ravi varajases staadiumis kontrollige ALLEVYN GENTLE BORDER plaastreid sageli. ALLEVYN GENTLE BORDER plaastreid võib jätta peale kuni 7 päevaks, välja arvatud ristлуу piirkonnas, kus plaastri võib jätta paika kuni 5 päevaks. ALLEVYN GENTLE BORDER plaastreid tuleb vahetada olenevalt haava ja ümbritseva naha seisundist või kuni eksudaat on plaastrist läbi nähtav ja läheneb 0,5 cm kaugusele sideme padja servast, olenevalt sellest, kumb toimub varem. Otsus, millal plaaster vahetada, tuleks teha tervishoiutöötaja juhendamisel ja see peaks põhinema kliinilisel hinnangul ja kohalikel ravijuhenditel. Complaints@Smith-Nephew.com

Kui te usute, et selle seadme kasutamise ajal on esinenud ohujuhtum, teatage palun sellest tootjale ja oma pädevale riigiasutusele. Complaints@Smith-Nephew.com



Toote saadavus

Kood	Suurus	Saadavus
66800269	7,5 cm x 7,5 cm	10 tk karbis
66800270	10 cm x 10 cm	10 tk karbis
66800900	10 cm x 20 cm	10 tk karbis
66800264	10 cm x 25 cm	10 tk karbis
66800265	10 cm x 30 cm	10 tk karbis
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	10 tk karbis
66802142	12,5 cm x 12,5 cm	3 tk karbis
66800975	15 cm x 15 cm	10 tk karbis
66800273	17,5 cm x 17,5 cm	10 tk karbis
66800897	Ristluuside 16,8 cm x 17,1 cm	6 tk karbis
66800898	Ristluuside 16,8 cm x 17,1 cm	10 tk karbis
66800959	Mitu asukohta 17,1 cm x 17,9 cm	10 tk karbis
66801031	Ristluuside 21,6 cm x 23 cm	10 tk karbis
66800506	Kand 23 cm x 23,2 cm	5 tk karbis

Smith+Nephew kaubamärgid. Väljaandmise kuupäev 04/2024. Läbivaatamine 02.


Manufacturer / symbols

nadające się do recyklingu / Ambalaj reciclabil / Recyklovateľný obal / Embalaža, primerna za recikliranje / Geri
Dönüştürülebilir Ambalaj / عبوة قابلة لإعادة التدوير

 Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England
°Trade Marks of Smith+Nephew. ©Smith+Nephew
Date of issue 04/2024. Printed in/Imprimé en: XXXXXXXXXXXX. Revision 02
 Smith & Nephew Operations B.V.
Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands



STERILE EO

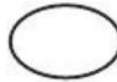

MD

UDI



ALLEVYN GB
*Global

134253RevA 42560